


**IL COLLAGENE È LA SOLUZIONE  
PIÙ EFFICACE PER UNA RAPIDA  
EMOSTASI E UNO STABILE COAGULO.  
MVG METTE A DISPOSIZIONE  
DELL'ODONTOIATRA LA SOLUZIONE  
IDEALE PER OGNI INDICAZIONE!!!**



**MVG COLLAGEN  
PLAST**

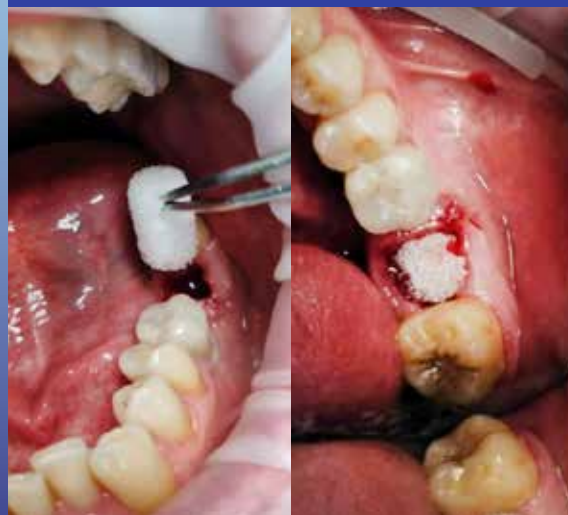

# Collagene ed Emostasi

Il collagene è uno dei potenti agenti emostatici: la sua azione è stata dimostrata in via sperimentale che in clinica. Dopo una lesione dell'endotelio vascolare, il **collagene contribuisce** in larga misura all'**attivazione dei fenomeni di coagulazione**.

Agisce al contempo sulla piastrinica e sulle due vie della coagulazione attraverso tre meccanismi distinti che portano alla **formazione di un trombo stabile e quindi meccanicamente efficace**:



- > **l'adesione e l'attivazione piastrinica**
- > **l'attivazione del fattore di Hageman (via intrinseca)**
- > **l'aumento della liberazione di tromboplastina tissutale (via estrinseca)**


L'adesione piastrinica rappresenta lo stadio iniziale della reazione a una aggressione e permette la costituzione del trombo primario che ha qualità meccaniche modeste.

Successivamente l'aggregazione diventa irreversibile.

Le proprietà di adesione e di aggregazione sono specifiche del collagene non denaturato -nativo- in quanto sono legate alla conservazione della struttura spaziale a tripla elica e alla presenza di radicali  $NH_2$  liberi distribuiti sulla molecola.

Tempo necessario all'emostasi e quantità di sangue perduta utilizzando diversi prodotti.

## TRATTAMENTO LOCALE DELL'EMORRAGIA CON COLLAGENE E ALTRI PRODOTTI.

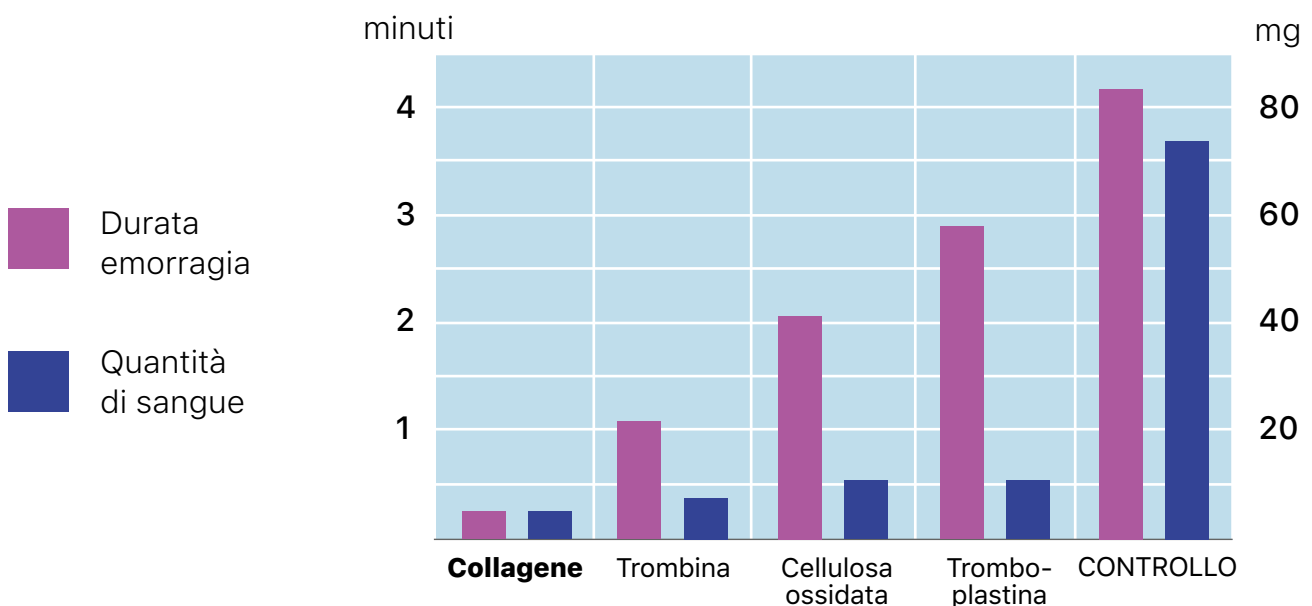

### I vantaggi del Collagene



Accelera il processo di guarigione naturale



Minore percezione del dolore



Elevata capacità emostatica

Facilità di modellazione


## Indicazioni in Odontoiatria

.....

- ✓ Estrazioni
- ✓ Chirurgia implantare
- ✓ Comunicazioni oro-antrali
- ✓ Prelievi di tessuto palatale (protezione del sito donatore)
- ✓ Preparazione di cavità di V classe
- ✓ In ogni caso, in soggetti con alterazione della crisi ematica e del meccanismo della coagulazione

### MVG COLLAGEN ACTIVE

MVG mette a disposizione COLLAGEN ACTIVE per **grandi cavità orali**

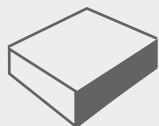

Membrana in collagene  
Formato 30x30x10mm

.....



### MVG COLLAGEN PLAST

MVG mette a disposizione COLLAGEN PAST come soluzione **post-estrattiva**




Membrana in collagene  
Formato 12x08diam mm

.....



### MVG COLLAGEN PROTECTION

MVG mette a disposizione COLLAGEN PROTECTION per **piccole cavità orali**

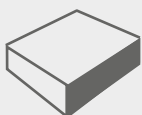

Membrana in collagene  
Formato 20x20x7mm

.....



## MVG COLLAGEN ACTIVE

<b>NOME PRODOTTO</b>	<b>MVG COLLAGEN ACTIVE</b>
<b>CODICE PRODOTTO</b>	MVG 303010
<b>MATERIALE</b>	COMPRESSA DI COLLAGENE
<b>MISURA</b>	30 X 30 X 10 MM
<b>BLISTER</b>	15 PEZZI
<b>TIPOLOGIA</b>	GAMMA STERILIZED
<b>STERILE</b>	COMPRESSA QUADRATA



## MVG COLLAGEN PLAST

<b>NOME PRODOTTO</b>	<b>MVG COLLAGEN PLAST</b>
<b>CODICE PRODOTTO</b>	MVG 1208
<b>MATERIALE</b>	COMPRESSA DI COLLAGENE
<b>MISURA</b>	12 X 08diam MM
<b>BLISTER</b>	24 PEZZI
<b>TIPOLOGIA</b>	GAMMA STERILIZED
<b>STERILE</b>	COMPRESSA CILINDRICA



## MVG COLLAGEN PROTECTION

<b>NOME PRODOTTO</b>	<b>MVG COLLAGEN PROTECTION</b>
<b>CODICE PRODOTTO</b>	MVG 202007
<b>MATERIALE</b>	COMPRESSA DI COLLAGENE
<b>MISURA</b>	20 X 20 X 07 MM
<b>BLISTER</b>	15 PEZZI
<b>TIPOLOGIA</b>	GAMMA STERILIZED
<b>STERILE</b>	COMPRESSA QUADRATA



### Affidati alla sicurezza dei nostri prodotti

*La ricerca dei prodotti di qualità, attraverso l'applicazione dei più rigorosi standard qualitativi, rappresenta il nostro core-business.*



**MVG COLLAGEN & TECHNOLOGY**  
Via Ceragioli 31,55049 Torre Del lago LU  
WEB: [www.mvgmedicaldevices.it](http://www.mvgmedicaldevices.it)  
EMAIL: [info@mvgmedicaldevices.it](mailto:info@mvgmedicaldevices.it)



  
**ESCLUSIVA ITALIA**